

けむいのでない

家庭用温熱・電位治療器

シグマビワオンキュ

枇杷葉エキスもぐさ温圧灸



安全

簡単

爽快

シグマビワオンキュは古来よりの枇杷葉療法を  
どなたにも安心してお使いいただけるようにした医療機器です。




シグマサイエンス株式会社



# どなたにも使いこなせる簡単操作

## ワンタッチ操作のシグマビワオンキュコントローラー

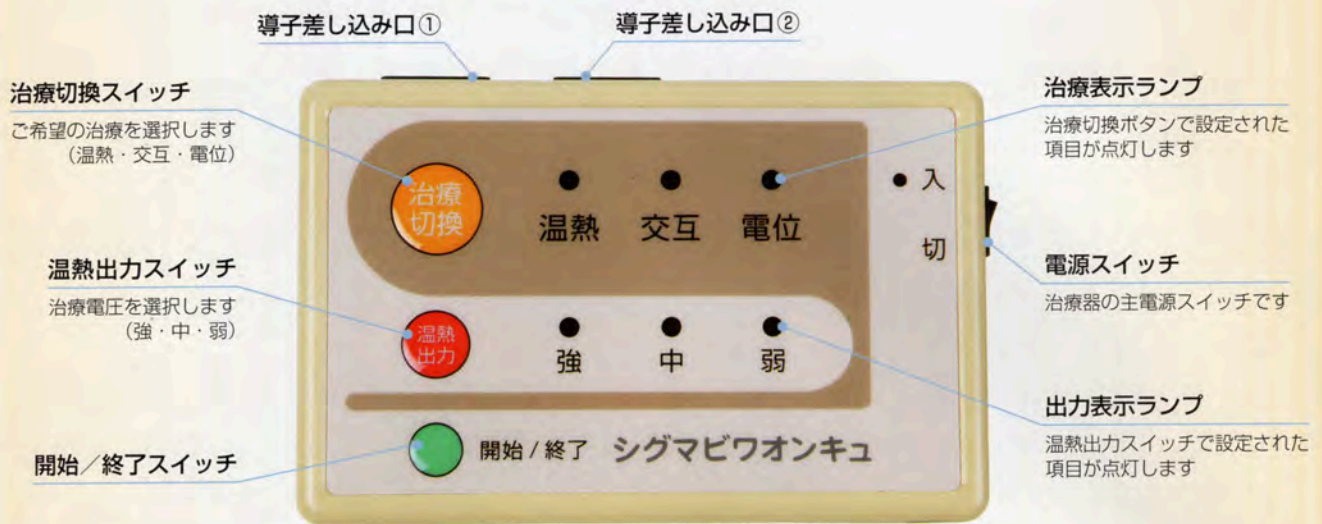

### 製品仕様

名称	シグマビワオンキュ
医療機器認証番号	220AGBZX00229000
定格消費電力	温熱:30W(初期:50W) 電位:5W
発熱体及び電床板	セラミックヒータ 遠赤コート
安全装置	温度過昇防止装置 過電流保護装置 自動OFFタイマー装置 接続検出装置
治療導子表面温度	[強]約62.5℃ [中]約59.5℃ [弱]約57℃
電位出力	-350V(差し込み口①側)
電力及び電気料金 1時間あたりの消費	[強]約26.3W 約0.74円 [中]約24.4W 約0.68円 [弱]約22.6W 約0.63円
寸法および質量 ①治療導子(本体) ②コントローラー	①φ64×140×146 約305g ②200×130×49.5 約665g
タイマー動作時間	1時間±6分
電源コード	約1.9m
出力コード	約2.0m
材質	本体 66ナイロン ガラス繊維 コントローラー ABS

### ■ご使用上の注意(次のような使い方は絶対におやめください)

#### 【禁忌・禁止】

#### 併用医療機器

次のような医用電気機器との併用は、誤動作を招くおそれがありますので電位治療および交互治療は使用しないでください。

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 心電計等の装着型医用電気機器

#### 適用対象(患者)

- 電位治療および交互治療は、心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

次のように医師から診断を受けている方は、医師と相談された上でご使用ください。

#### ○電位治療・温熱治療

- 悪性腫瘍のある方 ・心臓に障害のある方 ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 ・体温38℃以上(有熱期)の方

例1. 急性炎症症状(倦怠感、寒寒、血圧変動など)の強い時期にある方

例2. 衰弱している方

- 安静を必要とする方 ・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患のある方 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方

- 高血圧の方 ・不整脈のある方 ・睡眠時無呼吸症の方 ・喘息の方
- 子供には使用させない。(保護者または専門の監視下で使用の場合はその限りではない。)

#### ○温熱治療

- 温度感覚喪失が認められる方
- 低温火傷をしたことのある方

#### ○交互治療の場合も上記の症状のある方は、医師と相談された上でご使用ください。

※掲載商品の色調は印刷インキや撮影条件から実際の色と異なって見えることがあります。

※使用上のご注意は取扱説明書をよくお読みください。

※ご不明な点がございましたら担当の者にお問い合わせください。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

(このカタログの内容は2014年3月現在のものです。)

■シグマビワオンキュセット・コントローラー 261,800円(税込)

シグマビワオンキュ本体+EMカセット10ヶ入付 238,000円(税別)

### 発売元

シグマサイエンス株式会社

〒675-1371 兵庫県小野市黒川町85-6

TEL 0794-62-0360 FAX 0794-63-2032

### 製造販売元

テクノエレメント株式会社

静岡県浜松市東区小池町1532番地



EMカセット別売  
30ヶ入 7,000円(税別)

7,700円(税込)

